

CORTADORA FLY

Termodesinfección de bolsas de drenaje



Steelco
devoted to hygiene



“For the Environmentally conscious”



Aspectos medioambientales y costes asociados a residuos contaminados

La separación de los residuos clínicos entre contaminados y generales es la mejor manera de gestionar de manera segura y a un coste efectivo la eliminación de los residuos. **La reducción de la cantidad de residuos clínicos contaminados** es un objetivo que debe ser perseguido para evitar **el riesgo de gestión**, reducir **el impacto ambiental** y reducir **los costes** relacionados con su manejo.

Steelco, **primero y único en el mercado**, posee la solución para la eliminación segura de las bolsas de drenaje. Mediante un corte automático, se lavan y termodesinfectan las bolsas de drenaje contaminadas así como otros residuos en bolsas de plástico ...

De esta manera, se convierten en residuos generales o pueden seguir indicaciones de reciclaje según sus etiquetas ecológicas.



CORTADORA FLY

Termodesinfección de bolsas de drenaje

Una importante ayuda para el tratamiento de las bolsas de drenaje y de los elementos utilizados para la recolección de los residuos líquidos: la bolsa se corta, se lava y se termodesinfecta con vapor a 80°C durante 1 minuto.

Al final del proceso la bolsa ya no está contaminada y se convierte en un producto desechable.

- + ahorro económico**
no costes extra para la eliminación de las bolsas contaminadas
- + beneficios medioambientales**
no hay incineración, el plástico puede ser reciclado
- + seguridad del personal**
se reduce la manipulación de las bolsas contaminadas
- + eliminación de malos olores**
la fase de lavado químico elimina las fuentes de olor

Ejemplos de las bolsas de drenaje que se utilizan más habitualmente




CORTADORA FLY - Perfiles principales

- Sistema de control Steelcotronic, con verificación de auto diagnóstico, que monitoriza constantemente y muestra la situación del ciclo actual y sus alarmas.
- Panel de control seguro y fácil de entender.
- Las bolsas de drenaje son cargadas de una manera ergonómica.
- La puerta de la cámara se bloquea durante la totalidad del ciclo. La apertura de la puerta tan sólo es posible una vez la termodesinfección se ha completado.
- Sistema de hojas de corte múltiple y automático.
- Tratamiento de hasta 2 bolsas de manera simultánea.
- Sistema de lavado interno mediante multi-aspersores y para el ciclo de auto-limpieza.
- Con generador integrado para desinfección por vapor a 80°C.
- Como estándar, bomba para detergente y producto desincrustante.

Dimensiones y conexiones

Conexiones eléctricas estándar*	400V/3~ +N/50Hz
Potencia	5400 W
Potencia de la bomba	900 W
Nivel sonoridad	48.5 dB(A)
Temperatura ambiental admitida	+5°C / +40°C

*400-380-230-220 V~ 50-60 Hz y otras conexiones eléctricas disponibles de acuerdo al voltaje de suministro eléctrico solicitado en lugar de destino

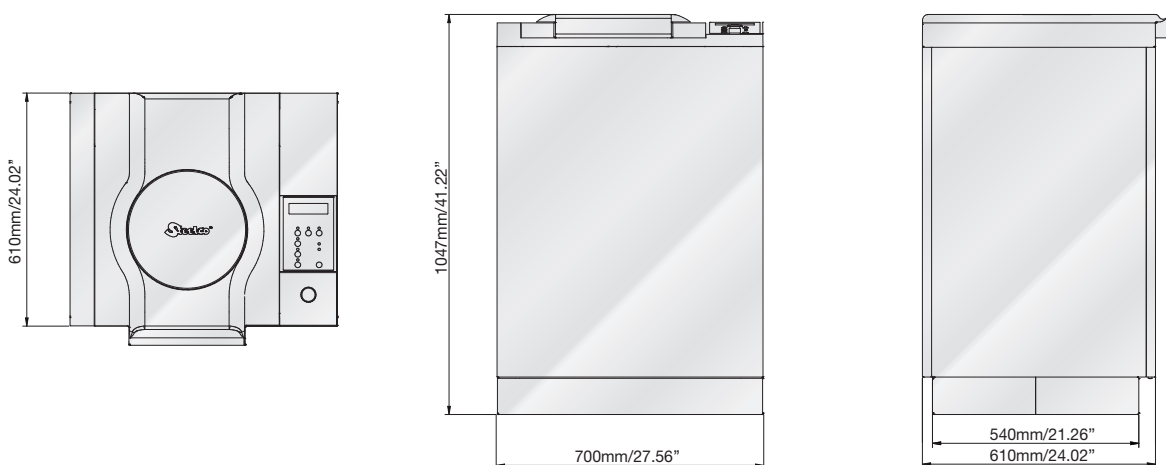

1	Conexión agua caliente	¾" macho	DN 20 mm
2	Conexión agua fría	¾" macho	DN 20 mm
3	Aire comprimido	¼" macho	5lt/min. 600Kpa
4	Conexión eléctrica		
5	Desagüe de la máquina	Ø 90 mm	

Seguridad de los operarios



La CORTADORA y TERMODESINFECTORA de bolsas de drenaje "FLY" así como su dispositivo de corte están diseñados para garantizar la seguridad total del personal de enfermería. Las bolsas de drenaje se sitúan directamente en el soporte especial del interior del equipo.

El personal sólo debe bajar la tapa y accionar el panel de mando.

Sus reducidas dimensiones permiten el uso de este dispositivo directamente en las salas del hospital, incrementando la seguridad del personal mediante la reducción de la manipulación y transporte de las bolsas de drenaje.



www.steelcospa.com



Headquarter

STEELCO S.p.A.

Via Balegante, 27 - 31039 Riese Pio X (TV) - Italy
 Ph. +39 0423 7561 - Fax +39 0423 755528
 e-mail: steelco@steelcospa.com
www.steelcospa.com

Branches

STEELCO HUNGARY

Temesvár u., 19-21
 1116 Budapest - Hungary
 Ph. +36 1 371 0257
 Fax +36 1 371 0258
 e-mail: steelco@t-online.hu

STEELCO USA

999 Stinson Way - Unit 301
 West Palm Beach, FL 33411 USA
 Ph. +1 561 791 8313
 Fax +1 561 791 8213
 e-mail: contact@steelco-usa.com

STEELCO ASIA

6th floor, Suite 16, IOI Business Park
 Persiaran Puchong Jaya Selatan - Bandar Puchong Jaya
 47100 Puchong, Selangor - Malaysia
 Ph +60 3 8064 4339 (Ext. 112) - Fax: +60 3 8064 4340
 e-mail: adminasia@steelcospa.com



Los productos ofertados para venta pueden diferir de los descritos o ilustrados en este catálogo debido a cambios últimos de fabricación y/o configuraciones opcionales. Los productos y sus especificaciones técnicas están sujetos a cambios sin previo aviso. Por favor, consulte con Steelco S.p.A. para obtener la información más actualizada.

DC-PP-02-FLY-ES Rev.00