

FLY CUTTER

dispositivo per il trattamento delle sacche di drenaggio



Steelco
devoted to hygiene



“For the Environmentally conscious”



Smaltimento dei rifiuti speciali ospedalieri

I **rifiuti speciali** ospedalieri comportano elevati **rischi per il personale** coinvolto nella loro gestione e generano un rilevante **impatto ambientale** legato alle procedure di smaltimento. La riduzione della loro quantità è quindi un obiettivo primario per la **tutela ambientale** e il **contenimento dei costi di gestione**.

Steelco, prima ed **unica nel mercato**, offre una soluzione sicura per lo smaltimento delle sacche di drenaggio consentendone, dopo il loro trattamento automatico, lo smaltimento come rifiuto generico in osservanza delle indicazioni di riciclo "ecolabel".



"For the Environmentally conscious"



FLY CUTTER - Dispositivo per il trattamento delle sacche di drenaggio

Fly cutter costituisce un importante supporto per il trattamento delle sacche di drenaggio usate per la raccolta di sostanze umane contaminate: la sacca viene tagliata, lavata e termodisinfettata a vapore ad una temperatura di 80 °C per 1 minuto. Al termine del processo la sacca decontaminata diviene materiale riciclabile.

- + risparmio economico**
azzerando i costi per lo smaltimento di rifiuti speciali
- + benefici per l'ambiente**
evitando l'incenerimento e riciclando il materiale plastico
- + sicurezza per gli operatori**
riducendo la manipolazione e il trasporto di materiale contaminato
- + trattamento inodore**
la fase di lavaggio elimina completamente gli odori

Esempi di sacche di drenaggio usate più comunemente.




FLY CUTTER - Caratteristiche principali

- Il pannello di controllo Steelcotronic è sicuro e di facile comprensione. E' dotato di funzioni di autodiagnosi che consentono il monitoraggio continuo ed in tempo reale del ciclo di lavaggio.
- L'ergonomia della macchina consente il carico delle sacche di drenaggio ad un'altezza corretta per l'operatore.
- L'apertura della porta è bloccata durante l'intero ciclo.
- Sistema automatico multi-lama
- Trattamento simultaneo fino a 2 sacche di drenaggio
- Sistema multi-jet per il lavaggio all'interno delle sacche e per l'auto-pulizia dell'apparecchiatura.
- Generatore di vapore incorporato per una disinfezione a vapore a 80°C.
- Equipaggiata con dosatori per anticalcare e per detergente.

Conessioni

Allacciamento elettrico	400V/3~+N/50Hz
Potenza totale	5400 W
Potenza pompa	900 W
Rumorosità	48.5 dB(A)
Temperatura di utilizzo	+5°C / +40°C

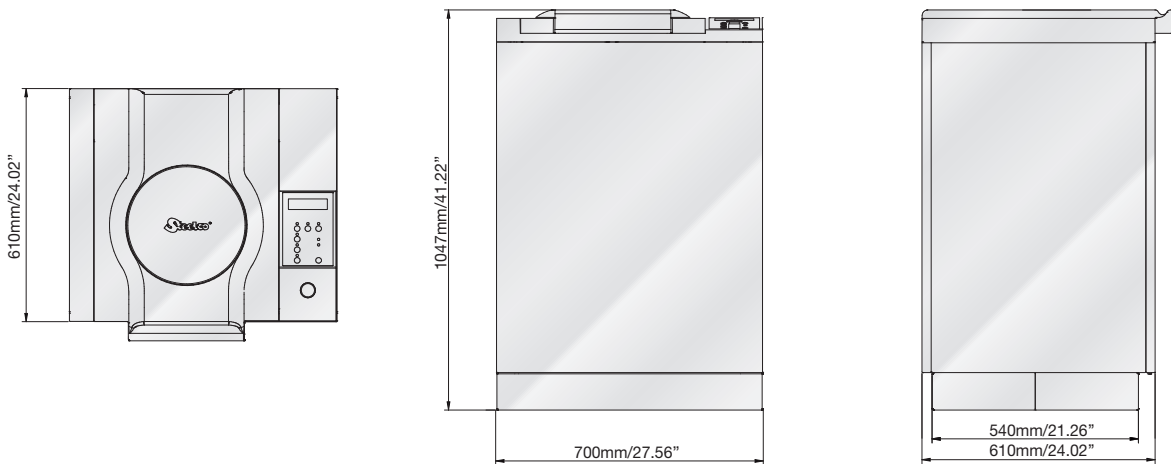


1 Allacciamento acqua calda	¾" maschio	DN 20 mm
2 Allacciamento acqua fredda	¾" maschio	DN 20 mm
3 Aria compressa	¼" maschio	5lt/min. 600Kpa
4 Allacciamento elettrico		
5 Scarico	Ø 90 mm	

Più sicurezza per l'operatore



Il dispositivo Steelco FLY CUTTER è concepito per garantire la massima sicurezza di utilizzo. L'operatività richiede il semplice inserimento delle sacche nelle sedi previste e ogni contatto con parti della macchina è escluso ad eccezione del coperchio e del pannello di controllo.

Le ridotte dimensioni di FLY CUTTER consentono di posizionarla direttamente nei locali di servizio del reparto riducendo i rischi del personale coinvolto nelle operazioni di gestione e trasporto.

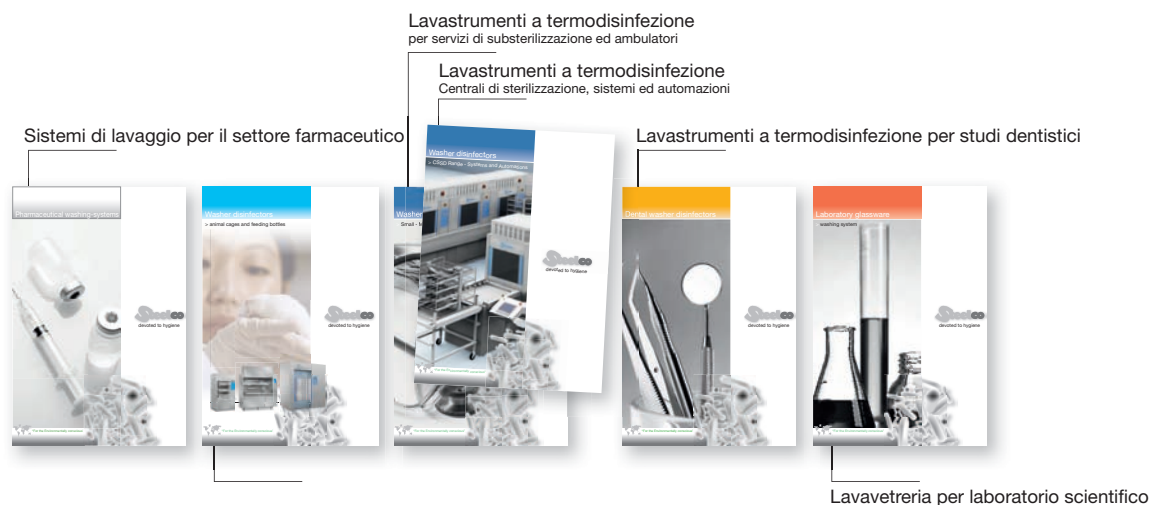

www.steelcospa.com



Headquarter

STEELCO S.p.A.

Via Balegante, 27 - 31039 Riese Pio X (TV) - Italy
 Ph. +39 0423 7561 - Fax +39 0423 755528
 e-mail: steelco@steelcospa.com
www.steelcospa.com

Branches

STEELCO HUNGARY

Temesvár u., 19-21
 1116 Budapest - Hungary
 Ph. +36 1 371 0257
 Fax +36 1 371 0258
 e-mail: steelco@t-online.hu

STEELCO USA

999 Stinson Way - Unit 301
 West Palm Beach, FL 33411 USA
 Ph. +1 561 791 8313
 Fax +1 561 791 8213
 e-mail: contact@steelco-usa.com

STEELCO ASIA

6th floor, Suite 16, IOI Business Park
 Persiaran Puchong Jaya Selatan - Bandar Puchong Jaya
 47100 Puchong, Selangor - Malaysia
 Ph +60 3 8064 4339 (Ext. 112) - Fax: +60 3 8064 4340
 e-mail: adminasia@steelcospa.com

I prodotti disponibili possono differire da quelli descritti o rappresentati in questo catalogo per modifiche di produzione e/o di allestimento standard/opzionale determinate successivamente. I prodotti e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifica senza preavviso. Per informazioni aggiornate consultate il vostro rivenditore Steelco.